

# Novi modeli COMPEX – Chattanooga REHAB / THETA / PHYSIO



## Promotivne cijene

**Model REHAB:** 4-kanalni elektrostimulator mišića za profesionalnu upotrebu. Razvijen za fizioterapeute i rehabilitacijske klinike kojima je potrebna standardna uporaba elektrostimulacije. Ima 2 osnovna programa: TENS, NMES. Koristi se kod uklanjanje boli, u liječenju vaskularnih bolesti, te za stimulaciju mišića, čime zadovoljava glavne zahtjeve stručnjaka.

Konfiguracija programa (strana 2) **paketa STANDARD (22 programa)**

**Model THETA:** 4-kanalni elektrostimulator, razvijen za liječenje oba standarda (TENS, NMES) i i posebnih protokola u rehabilitaciji kada se traži suradnja i kontrakcija. Neurologija (spastičnost, hemiplegija stopala, Agonist-Antagonist) ili specifične patologije kao npr.

program ACL. Konfiguracija programa (strana 2) **paketa FULL (63 programa)**

**Model PHYSIO:** 4-kanalni elektrostimulator razvijen za sve indikacije u elektroterapiji: standardni (TENS/NMES), potpuna stimulacija mišića (neurologija, ACL) i denervirani mišići, iontoforeza, hiperhidroza, urologija i prevencija edema.

Konfiguracija programa (strana 2) **paketa OPTIMUM (74 programa)**

## Prednosti novih modela

### - Tehnologija Muscle Intelligence™ Mi-senzor

#### Automatska prilagodba jačine stimulacije, ovisno o izabranom programu i fiziologiji!

Model **REHAB** je Mi-Ready (Integrirana Mi tehnologija na sva 4 kanala, ali Mi senzor kabel nije priložen). Dostupan uz doplatu.

Modeli **THETA** i **PHYSIO** imaju uključen jedan **2**, a drugi **4** Mi senzor kabel. Funkcije Muscle Intelligence – su automatske po želji u trenutku, pri uključivanju Mi- senzora. **4 Mi funkcije** patentiranoga sustava Mi-senzor prema želji na sva 4 kanala.

- **Mi-Scan** – prilagodba stimulacije prema fiziologiji, za veću ugodu i učinkovitost
- **Mi-Tens** – prilagodba optimalne jačine stimulacije kod programa TENS
- **Mi-Range** – učinkovito djelovanje u rasponu intenziteta potrebnog za sve niskofrekventne programe
- **Mi-Action** – aktivne terapije s kontrakcijama koje uređaj detektira za pokretanje stimulacije

### - Funkcija „Trigger“-Funkcija „Okidač“(model Theta i Physio)

Započinje s aktivnom fazom stimulacije koju zahtijevaju protokoli (hemiplegično stopalo, spastičnost)

### - Funkcija „2 + 2“ (svi modeli)

Izaberite željeni program za kanale 1 i 2, a zatim s popisa izaberite drugi program za kanale 3 i 4. To omogućuje liječenje dva različita dijela tijela ili istovremenu obradu dva pacijenta ili kombinaciju NMES i TENS u jednoj terapiji.

### - Funkcija „Skip“ (svi modeli)

Prilagodite trajanje terapije svojim potrebama. Funkcija omogućuje prelaženje na iduće programe.

### - Olovka za pronalaženje motoričke točke - Motor Point Pen

Uključena u set. Koristan dodatni alat, koji osigurava optimalno postavljanje elektroda

### - I-Gumb - I-Button

Omogućuje vam da:

- jednostavno i brzo podešavanje jačine na sva četiri kanala u isto vrijeme
- brz pristup TOP omiljenim programima
- statistiku terapije (broj kontrakcija, jačina stimulacije)

### - Funkcija "Pauza"

Mogućnost zaustavljanja terapije, na primjer kada je potrebno pomaknuti elektrode

### - Programiranje programa

Mogućnost individualnog podešavanja svih parametara i projektiranje programa prilagođenog specifičnim potrebama pacijenta

### - Brzo punjenje

Punjenje baterije traje najviše 2 sata i pol

### - Priključni kablovi za sve vrste elektroda

Set uključuje 4 spojna kabla sa standardnim 2 mm priključkom na "žicu" i pretvarače za snap elektrode.

### - Jamstvo

24 mjeseca



# Popis programa

Osnovni programi – paket STANDARD - modeli

## Rehab / Theta / Physio / Wireless Pro Standard, Full


REHABILITACIJA I	UBLAŽAVANE BOLI	VASKULARIZACIJA	KONDIICIJA I
Disuse Atrophy	Tens 100Hz Gate Control	Venous Insufficiency 1	Resistance
Prevention of Disuse Atrophy.	Frequency Modulated Tens	Venous Insufficiency 2	Strength
Reinforcement	Endorphinic	Arterial Insufficiency 1	Active Recovery
Muscle Lesion	Decontraction	Arterial Insufficiency 2	
Motor Point	Pulse Width Modulated Tens	Capillarization	
	Burst	Heavy Legs	
	Burst/Tens Alternated	Cramp Prevention	

## Dodatni programi – paket FULL - modeli Theta/Physio/Wireless Pro Full

REHABILITACIJA II	NEUROLOŠKA REHABILITACIJA	UBLAŽAVANJE BOLI II	KONDIICIJA II
Hip Prosthesis	Spasticity	Tens 80Hz	Muscle Building
Patellofemoral Syndrome	Hemiplegic Foot	Knee Pain	Potentiation
ACL	Hemiplegic Shoulder	Fracture Pain	Endurance
Rotator Cuff	Slow Start Neuro Rehab.	Trapezius Pain	Explosive Strength
Lumbar Stabilization		Shoulder Pain	Hypertrophy
Cardiac Rehabilitation		Cervical Pain	Low Back Reinforcement
Atrophy 1/1 4 Channels		Thoracic Back Pain	Recovery Plus
Reinforcement 1/1 4 Channels		Low Back Pain	Toning Massage
Atrophy Modulated Freq.		Lumbosciatica	Relaxing Massage
Reinforcement Modulated Freq.		Lumbago	Antistress Massage
Hemophilia Atrophy		Epicondylitis	Core Stabilization
Hemophilia Reinforcement		Torticollis	Plyometry
		Arthralgia	

## Dodatni programi - paket OPTIMUM - samo model Physio

INKONTINENCIJA	DENERVIRANI MIŠIĆI	ISTOSMJERNA STRUJA
Stress Incontinence	Partial Automatic	Hyperhidrosis
Urge Incontinence	Total Automatic	Iontophoresis
Mixed Incontinence	Partial Manual	Edema
Post-Partum Prevention	Total Manual	

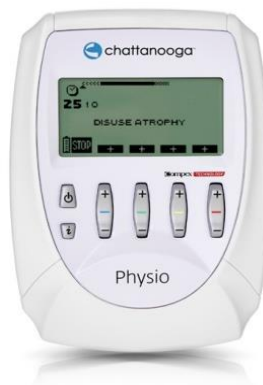

Compex uvoznik i distributer za Hrvatsku i Sloveniju

Kreja d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 1236 Trzin

Tel: 00385 91 940 27 20

[www.compex.hr](http://www.compex.hr)

[info@compex.hr](mailto:info@compex.hr)

\* Cijene uključuju PDV